


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION COCAÏNE / CRACK

ETAPE 1 : DETECTION

CATALOGUE N°. IDT 1000

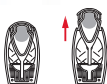

- A)** Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.



- B)** Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.



- C)** Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



- D)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



- E)** Agiter doucement l'unité pendant 2 à 3 secondes.



- F)** L'apparition d'une couleur turquoise sur les particules présentes à l'extrémité de la languette indique la présence de **cocaïne**.

A noter : l'intensité de la couleur peut diminuer avec le temps.

OPTION DE CONFIRMATION :

pour confirmer la présence de **cocaïne** utiliser le **KIT 2 Cocaïne/CRACK** (IDT 1100)



- G)** Si aucune couleur n'apparaît, briser l'ampoule de la **chambre 2**.



- H)** Agiter pendant 1 seconde.



- I)** L'apparition d'une couleur turquoise sur les particules présentes à l'extrémité de la languette indique la présence de **crack**.

OPTION DE CONFIRMATION :

pour confirmer la présence de **crack** utiliser le **KIT 2 COCAÏNE/CRACK** (IDT 1100)

- J)** Si aucune couleur turquoise n'apparaît, la substance ne contient ni cocaïne ni crack et il n'est pas nécessaire de procéder au test de confirmation.

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.

HOTLINE : +33(0)478 924 118

ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110

contact@isisanalytics.com